

ELGA

PURELAB® Chorus

Laboratuvar İhtiyaçlarınıza Uygun Su Arıtma Çözümleri



ANAMED & ANALİTİK GRUP
ANALİTİK ÇÖZÜMLERDE GÜVENCENİZ



Size seçme hakkı tanıyan güvenilir bir marka



Su arıtma, yenilik
ve teknoloji
alanında piyasa
lideri

75 yılı aşkın bir süredir yeni metotlar ve teknolojik gelişmeler alanında piyasaya liderlik ederek, laboratuvar, klinik ve sağlık amaçlı su arıtma çözümleri alanında uzmanlaşmış bulunmaktayız.

Binlerce ürünümüz, dünya genelinde günlük olarak kullanılmakta ve bilim adamları, sağlık uzmanları ve laboratuvar yöneticilerinin çalışmalarında yüksek doğruluk ve tutarlılık düzeylerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

İnsanların hayatlarını ve çevreyi iyileştiren kalıcı ve sorumlu çözümler yaratan dünyanın en büyük çevre şirketi Veolia'nın bir parçasıyız.

Saf su ve sadece saf su taahhüdümüz, gelecek yıllarda da en iyi hizmetle en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğimizin bir garantisidir.

Müşterilerimize mükemmel hizmet ve desteğin yanı sıra, su arıtma çözümlerimizi nasıl kullanacakları konusunda tercih fırsatı sunduğumuza inanıyoruz. Bizimle işbirliği yapan müşterilerimize değer katmayı amaçlıyor ve sorumluluğun tüm ticari faaliyetlerimizin kilit taşıını oluşturduğuna inanıyoruz. oluşturduğuna inanıyoruz.

Ödüllü Ürünler



red dot design award
winner 2011

dba design effectiveness
award winner

“Müşterilere seçme hakkı tanımak, teknolojik olarak gelişmiş, kullanımı ve bakımı kolay ve tüm müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanmış çözümleri sunma taahhüdümüzün çekirdeğini oluşturmaktadır.”



Dünya’da Geniş Kapsam, Türkiye Çapında Servis ve Destek

Her ELGA çözümü özel bir ekstra ile birlikte geliyor - Dünyanın neresinde olursanız olun birinci sınıf hizmet ve destek.

Uzmanlarımız tüm kurallara uygun şekilde su arıtma sistemlerinin kurulumu, bakımı ve validasyonu için size destek olur.

Detaylı bilgi için: www.anamed.com.tr adresini ziyaret edin.

Hizmet Mükemmelliği

Bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olarak kişiselleştirilmiş servis sözleşmeleri sunuyoruz.

Eğitim

Optimum sistem performansını sağlamak ve iş akışındaki kesinti ve riski en aza indirmek için, montaj sırasında cihazın çalıştırılması ve kullanım eğitimi veriyoruz.

İlk Seferde Doğru Çözüm

İhtiyaçlarınız için en doğru su saflaştırma sistemini kullanmanız için besleme suyunuzun saflık analizlerini yapıyoruz. Analizlerden elde etmiş olduğumuz sonuçlar ile sizin ihtiyaçlarınızı birleştirip, size özel bir saf su çözümü sunuyoruz.

Validasyonu yapılmış bir sisteme ihtiyacınız varsa;

ELGA tam eğitilmiş personelleri ile kontrollü ekipmanlarını ve belgelerini kullanarak validasyon paketi sunuyor ve bütün validasyon sürecinde size destek oluyoruz.



“ELGA sistemlerini kullanmayı seviyorum çünkü iyi çalışır ve neredeyse bakım gerektirmez – çalıştırıyorsunuz ve diğer işlerinizle ilgilenebiliyorsunuz. ELGA tam bir “al ve unut ” ve sistemi, bizim yoğun ve zorlu laboratuvarlarımızda ve temiz odalarımızda son derece değerli olduğunu defalarca kanıtlamıştır .”

Steve Walker - Kıdemli Deneysel Görevlisi
Nanobilim ve Teknoloji Merkezi



PURELAB Chorus... Sizin Tercihiniz

PURELAB Chorus, gelecekte ihtiyaçlarınızın değişmesi durumunda sunduğu esneklik özelliğiyle birlikte, bir çözümü ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde oluşturma seçeneğini size sunmaktadır.

- PURELAB Chorus 1** – Ultra saf Tip I⁺/I çözümlerinizi için
- PURELAB Chorus 2** – Saf Tip II çözümlerinizi için
- PURELAB Chorus 3** – Genel kalitede Tip III çözümlerinizi için
- Halo Dağıtım Ünitesi Çözümleri** – Üç farklı uzaktan dağıtım ve izleme çözümü
- Depolama Tankları** – PURELAB® Chorus su saflaştırma çözümlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır

Çözüm Bulucu

Bu kılavuz, uygulama ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü seçmenize yardımcı olacaktır. Teknik/uygulama uzmanlarından oluşan ekibimiz, sorularınıza cevap vermek ve aynı zamanda uzman tavsiyeler sunmak üzere emrinizdedir.

E-posta sales@anamed.com.tr

Su kullanımı litre/gün	PURELAB Chorus 1 (Sayfa 7 & 8)		PURELAB Chorus 2 (Sayfa 11 & 12)		PURELAB Chorus 3 (Sayfa 11 & 12)
	Type I ⁺	Type I	Type II ⁺	Type II	T III
Tipik Uygulamalar	ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle) Moleküler biyoloji teknikleri Ultra-eser analizi	Elektrokimya Elektroforez GFAAS (Graft Fınlı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi) HPLC IC (İyon Kromatografisi) ICP-AES (Endüktif Eşleşmiş Atomik Emisyon Spektrofotometrisi) ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrofotometrisi) Memeli ve bakteriyel hücre kültürü Moleküler biyoloji Bitki doku kültürü Kalitatif analizler	AAS (Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi) Tampon ve ortam hazırlama Elektrofizyoloji FAAS (Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi) Ultra saf su sistemlerine besleme Cam malzemelerin yıkanması / durulanması Genel kimya Histoloji Mikrobiyolojik analiz RIA (Radyo immün analiz) / ELISA (Enzim Bağlı İmmüno sorbent Analizi) Numune dilüsyonu ve reaktif hazırlama Spektrofotometri Su analizi	Otoklav besleme Ultra saf su sistemlerine besleme Hidroponi Bitki yetiştirme dolapları Stabilite odaları Buhar jeneratörleri Sterilizatör besleme Isıtma banyosu Cam malzemelerin durulanması	

Analitik Araştırma Sorunu

Analizcinin Sorunu

Lab 1 – Jel Hazırlama için Tip I ultra saf su gereklidir. Biyolog, endotoksinlerin varlığının konak organizmayı etkileyeceği konusunda endişelidir. Laboratuvarda ayrıca bir otoklava beslemenin sağlanması da gereklidir.


Lab. 2 – DNA-hücre transferi için Tip 1 ultra saf su gereklidir. Müşteri, nükleazlar ve bakterilerin varlığından endişelenmektedir.

Çözüm

Laboratuvar alanından en uygun şekilde faydalanmak üzere, lavabo üzerinde konumlandırılan ve PURELAB Chorus 1'i besleyecek olan genel kimya amaçlı 15 litrelik bir depolama tankı ve altına yerleştirilerek entegre edilen Halo Gelişmiş dağıtım ünitesi ile birlikte PURELAB Chorus 2.

Gerçek zamanlı TOC izleme, organik saflık açısından güvenilirlik sağlar.

AutoVolume Dispense (Hacme göre Otomatik Dağıtım) özelliği, laboratuvarda oluşabilecek kazara su baskınlarını önler ve rahatlık için lavabonun üzerine yerleşecek şekilde konumlandırılır.

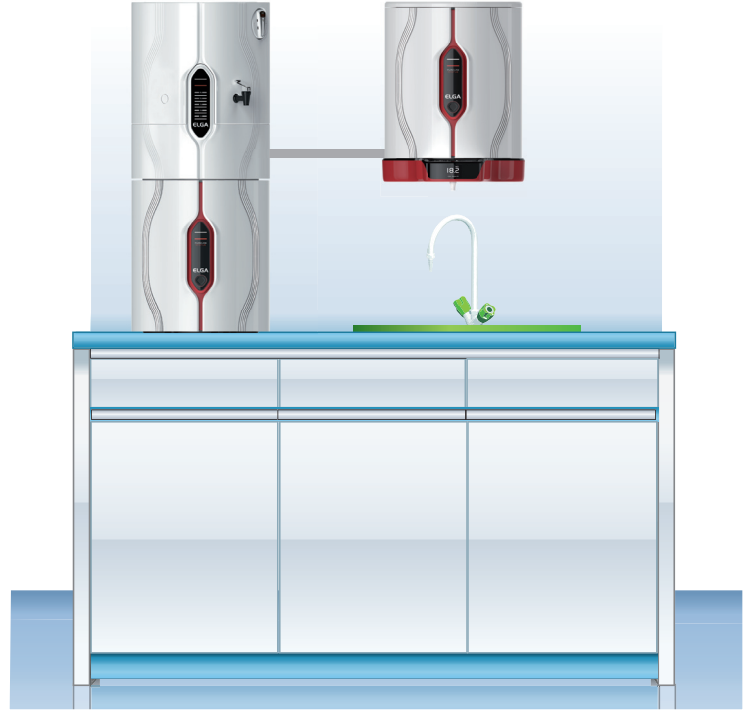

Yaşam Bilimi Sorunu

Biyoloğun Sorunu

Lab 1 – Jel Hazırlama için Tip I ultra saf su gereklidir. Biyolog, endotoksinlerin varlığının konak organizmayı etkileyeceği konusunda endişelidir. Laboratuvarda ayrıca bir otoklava beslemenin sağlanması da gereklidir.


Lab. 2 – DNA-hücre transferi için Tip 1 ultra saf su gereklidir. Müşteri, nükleazlar ve bakterilerin varlığından endişelenmektedir.

Çözüm

Lab. 1 – Tezgahın altına yerleştirilen ve PURELAB Chorus 1'i besleyecek olan 30 litrelik depolama tankı ve Gelişmiş Halo Dağıtım Ünitesi ile birlikte PURELAB Chorus 3.

(Depolama Tankı Otoklava doğrudan besleme sağlayacaktır)

Lab. 2 – Laboratuvar 2'ye yerleştirilen DNaz / RNaz'ların uzaklaştırılması için Kullanım Yerde uygulanan Biyofiltre ile donatılmış ek Halo esnek dağıtım ünitesi.

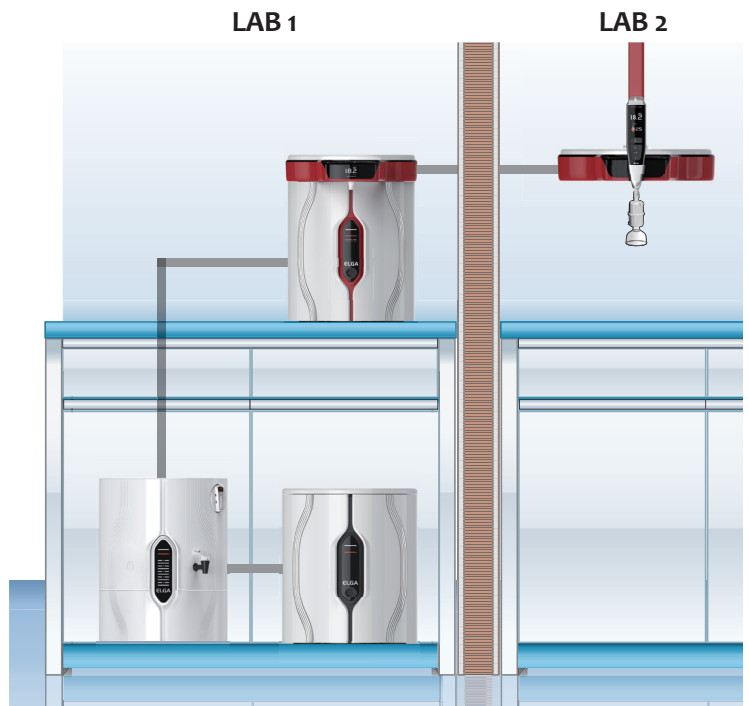


The PureSure® Konsepti

Tüm deiyonizasyon (iyonsuzlaştırma) proseslerinde, zayıf iyonize safsızlıkların tükenmeye yaklaştıkça reçinelerden ayrışarak uygulamanıza karışma riski bulunmaktadır.

PureSure bunu önler.

Benzersiz bir çift arıtma kartuşu ve izleme sisteminden oluşan PURELAB Chorus, size kesintisiz iş akışı ile birlikte doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayan bazı önemli faydalar sunar:

- Garanti edilen su saflığı
- Organik maddeler, silikon veya bor geçişinin olmaması
- Arttırılmış güvenlik
- Kapasite kazanımları, sarf malzemelerinin kullanımını optimize eder
- Zayıf iyonize safsızlıkların uzaklaştırılmasını sağlar
- Arıtma kartuşunun kullanım ömrüne ilişkin erken uyarı

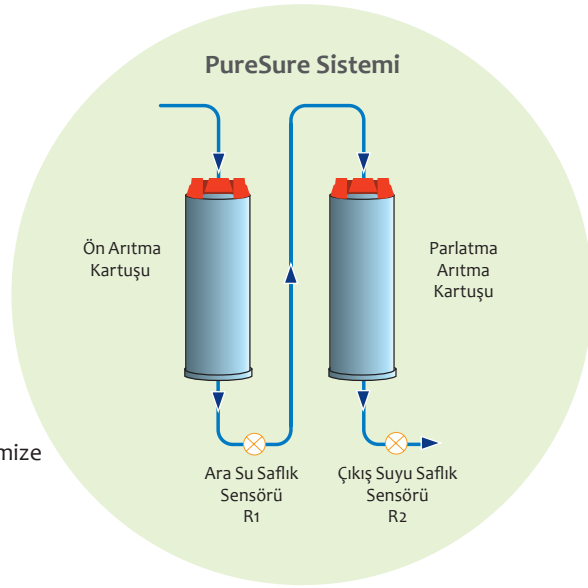

Entegre Filtreler



PURELAB Chorus, entegre ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon sistemleri sunar.

Bu entegre sistem, ultra saf su elde etmek için tek bir point-of-use (kullanım yerinde uygulanan) sistemine dayanan yöntemden ziyade, RO, iyon değişimi, UV, kimyasal sanitizasyon ve mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon gibi teknolojileri birleştirerek daha etkili bir bütüncül sistem yaklaşımı sunar.

Tipik olmayan bu POU filtrelerinin sağladığı başlıca faydalar:

- Bakteri ve endotoksin düzeyleri, kullanımdan önce tekrar filtre edilebilir veya yeniden sirkülasyondan geçirilebilir
- Ekstra güvenlik ve rahatlık

Analitik Uygulamalar

Organik Maddeler
Bakteriler
Partiküller

Yasam Bilimi Uygulamaları

Nükleazlar (RNaz and DNaz)
Bakteriyel endotoksinler & pirojenler
Bakteriler
Partiküller

Gerçek Zamanlı TOC İzleme


Toplam Organik Karbon (TOC), organik safsızlıkların varlığının evrensel bir göstergesidir.

TOC'ü sürekli izleyerek, suyun genel organik saflığından emin olabiliriz.

UV ile oksidasyon öncesi ve sonrası artırılmış suyun öz direnci ölçülerek, fark hesaplanabilir ve böylece sudaki TOC konsantrasyonu tahmin edilebilir.

Gerçek zamanlı TOC izlemenin avantajları:

- Ekran, resirkülasyon ve/veya dağıtım sırasında her 2 saniyede bir hesaplanır
- Güvenilir ve hızlı organik saflık gösterimi
- Sistemdeki herhangi bir yoğun organik yük, ultra saf su dağıtılmadan önce saptanabilir

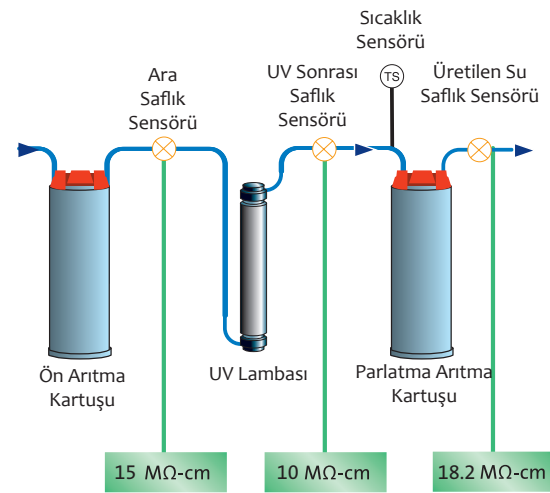


A B C kadar kolay

Birçok çeşit laboratuvar ve birçok çeşit bilim adamı bulunmaktadır. PURELAB Chorus, tüm laboratuvar türlerinin ihtiyaçları ve bütçelerine uymak üzere çeşitli şekillerde yapılandırılabilir bir modüler sistemdir.

PURELAB Chorus, tamamen ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm sunmaya yöneliktir:

- Uygulama
- Bütçe
- Yapılandırma

Kontrol
tamamen
Sizin !

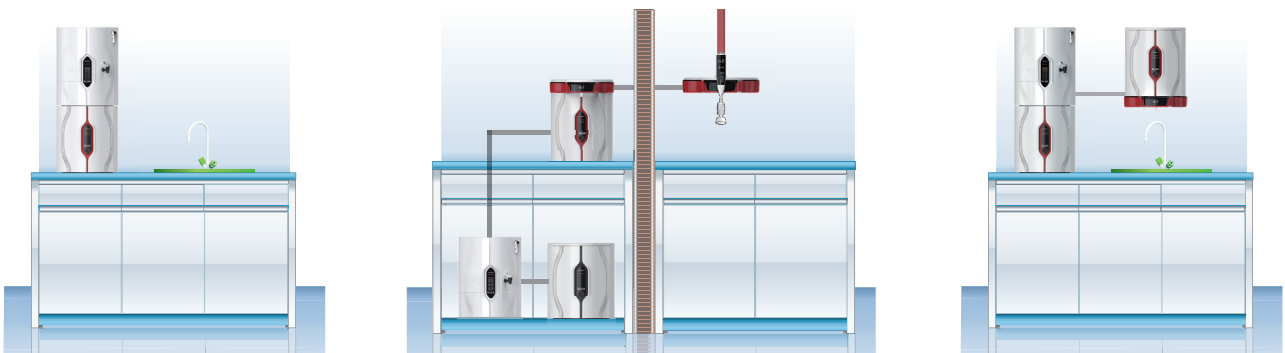



En üst noktada su saflığına yönelik talebin nedeni?



ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometrisi), ultra eser analizi ve moleküler biyoloji teknikleri gibi en karmaşık araştırma ve test uygulamaları için, kirlenici safsızlıklardan kaynaklanan yanlış sonuçlara neden olan her tür girişimi önlemek için en yüksek saflıkta su kullanılması kritik önem taşır.

(aşağıdaki tabloya bakınız)

PURELAB Chorus 1

Sonuçlarınızda mutlak güvenilirlik için su saflığının en üst noktaya taşınması


Uygulamanız en üst düzeyde su saflığını gerektirdiğinde, PURELAB Chorus 1 mükemmel çözümü sunar. Tutarlı olarak 18.2 MΩ-cm (Tip I+/I) saflıkta su elde edilmesini sağlayan ve gelişmiş PureSure® deiyonizasyon sistemiyle desteklenen PURELAB Chorus, bir taraftan kesintisiz iş akışı sağlarken sizin doğru sonuçlar elde etme üzerinde odaklanabilmenize imkan tanır.

Su arıtma sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik PURELAB çözümü

Sorun	PURELAB Çözümü
Uygulamanız, en üst noktada su saflığı gerektirmektedir; yani yalnızca 18.2 MΩ-cm öz dirence sahip olmak yeterince iyi değildir	PureSure sistemi, en üst noktada inorganik saflık sunar (silikon ve bor türlerinin tutulmasını garanti eder)
Organik madde geçişi önlenmelidir	Sürekli gerçek zamanlı Toplam Organik Karbon (TOC) izleme, su numunenizi dağıtırken organik saflığın hangi düzeyde olduğunu bilmenize olanak tanıyarak size gönül rahatlığı sağlar
Bir arıtma kartuşunu değiştirmek için işi durdurmayı göze alamazsınız	PureSure sistemi, işi durdurulmamasını sağlar
Su arıtma sisteminin tüm kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeyde mikrobiyal saflık gereklidir	Tüm ıslanan parçaların basit ve eksiksiz sterilizasyonu ile potansiyel bakteriyel çoğalmayı en aza indirecek organik kontrol garanti edilir

Yaygın Bilimsel Uygulamalar

- ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometrisi)
- Moleküler biyoloji teknikleri
- Ultra-eser analizi
- Elektrokimya
- Elektroforez
- GFAAS (Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi)
- HPLC
- IC (İyon Kromatografisi)
- ICP-AES (Endüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometrisi)
- Memeli ve bakteriyel hücre kültürü
- Moleküler biyoloji
- Bitki doku kültürü
- Kalitatif analizler

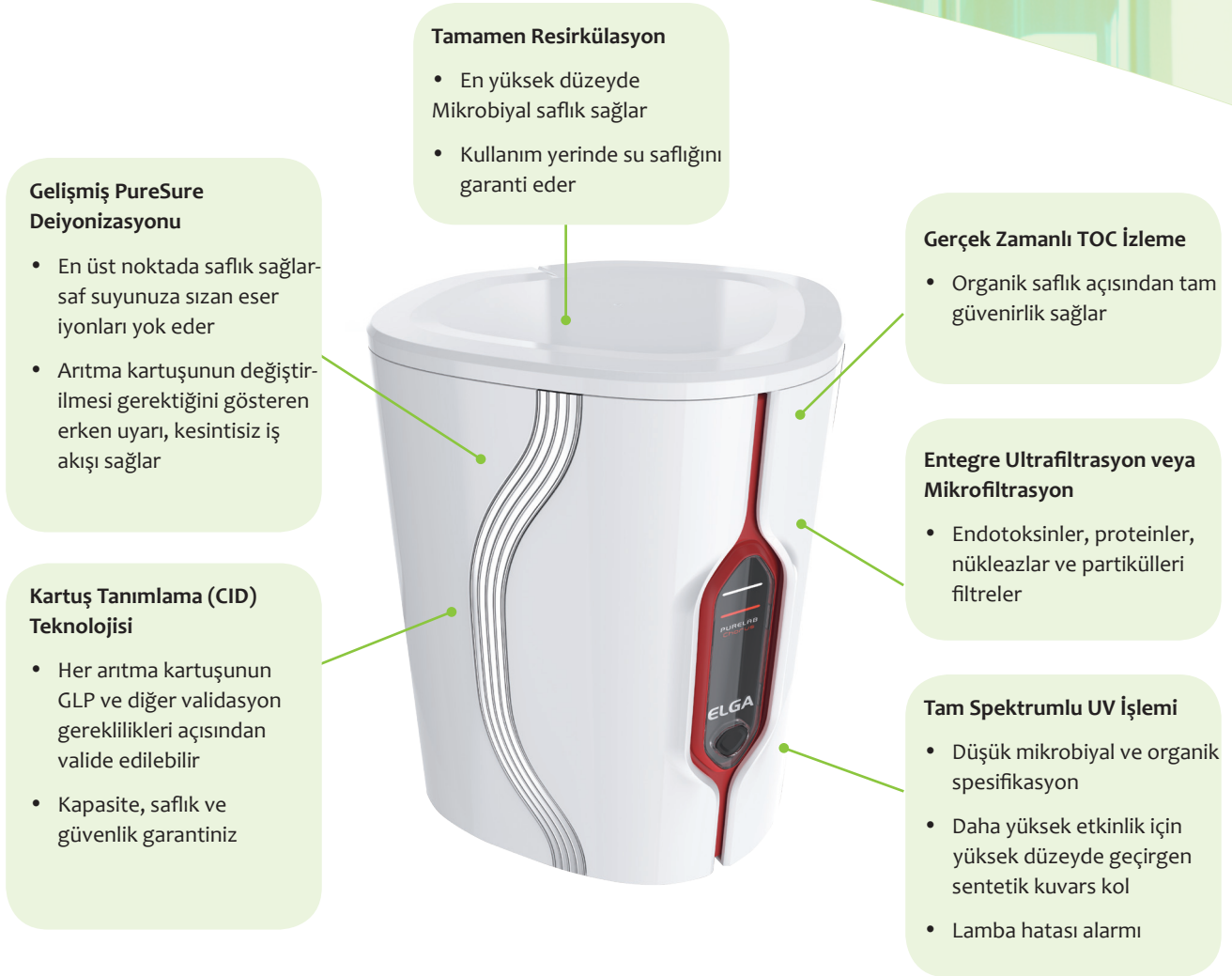

Halo Dağıtım Ünitesi Çözümleri

- Üç Halo dağıtım ve izleme çözümü, dağıtıcıyı su arıtma sisteminden bağımsız olarak yerleştirebilmenize olanak tanır. Yani PURELAB Chorus'u laboratuvarında değerli alanları en uygun şekilde kullanmak için bir tezgah üzerine, tezgah altına veya duvara monte edilecek şekilde yerleştirebilirsiniz.
- Uygulamanıza uyacak şekilde farklı kullanım noktası seçenekleri için en fazla dört dağıtım ünitesi çözümü seri olarak bağlanabilir ve özel su saflığı gerekliliklerinize göre ayarlanabilir



Halo Dağıtım Ünitesi Çözümleri

Üç uzaktan dağıtım ve izleme çözümü, PURELAB Chorus'u istediğiniz yere yerleştirebilmenizi sağlar – böylece değerli çalışma alanınızdan yer kazanabilirsiniz.

- **Halo Dağıtım Ünitesi** – Temel dağıtım ihtiyaçlarınıza yönelik sabit konumlu dağıtıcı
- **Halo Gelişmiş Dağıtım Ünitesi** – Gelişmiş kontrol özelliklerine sahip sabit konumlu dağıtıcı
- **Halo Esnek Dağıtım Ünitesi** – Gelişmiş kontrol özellikleri ve en üst noktada esneklik sunan portatif dağıtıcı



Benzersiz Halo ışık; sistem performansında oluşan değişiklikler durumunda renk değiştirerek ve yanıp sönerek sizi uyarır

Sürekli olarak ekranda gösterilen öncelikli bilgiler (sistem durumu, TOC, alarm)

Dağıtım sırasında mutlak güvenilirlik için berrak su saflığı ekranı

Kritik uygulamalar için gerçek zamanlı TOC izleme. TOC özelliğine sahip üniteler için

Su saflığı, kullanım yerine kadar izlenerek, gönül rahatlığı sağlar

Altı farklı şekilde esnek dağıtım

- Değişken akış – damla damla veya dakikada iki litreye kadar
- 50ml'den 60 litreye kadar AutoVolume (hacime göre otomatik) dağıtım
- Özel miktar gereksinimlerinize uygun varsayılan AutoVolume ayarı
- İsteğe bağlı ayak kontrolüyle dağıtım eller boştaki dağıtım özelliği
- Seçtiğiniz debide kilitlenen dağıtım
- Halo Esnek Dağıtım Ünitesiyle portatif dağıtım

Sistem performans validasyonu için USB aracılığıyla veri toplama


Çoklu Konumlandırma

Üç Halo dağıtım ve izleme çözümü, dağıtıcıyı su arıtma sisteminden bağımsız olarak yerleştirebilmenize olanak tanır. Yani PURELAB Chorus'u laboratuvarda değerli alanları en uygun şekilde kullanmak için bir tezgah üzerine, tezgah altına veya duvara monte edilecek şekilde yerleştirebilirsiniz.



Çoklu Dağıtım

Uygulamanıza uyacak şekilde farklı kullanım noktası seçenekleri için en fazla dört dağıtım ünitesi çözümü seri olarak bağlanabilir ve özel su saflığı gerekliliklerinize göre ayarlanabilir.

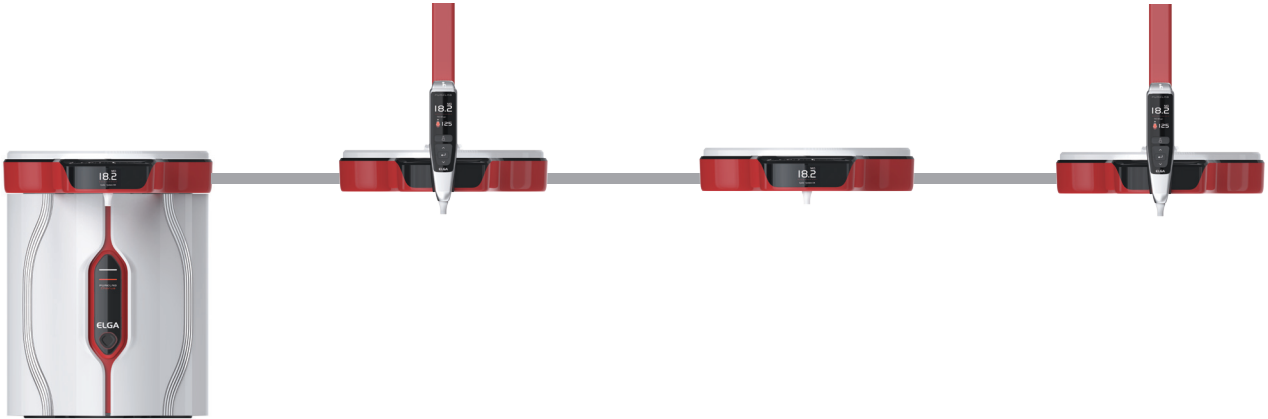

Aksesuarlar

- Ayak kontrollü dağıtım anahtarı
- Termal yazıcı
- Sızıntı sensörü
- Duvara montaj seçenekleri

Çoklu Uygulama için POU Filtre

- Endotoksinler, DNaz, RNaz ve q bakterilerin uzaklaştırılması
- ISO 696: Sınıf 1, 2 ve 3 ASTM D1193-06, USP, EP, JP Farmakopeleri ve CLSI / CLRW gibi uluslararası su standartlarına uygundur.





PURELAB Chorus 2 & 3

Depolama Tankları

ELGA'nın benzersiz ürün yelpazesindeki 15, 30 ve 60 litrelik su tankları, PURELAB Chorus'un üstüne veya altına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır

Güvenilir Tip II veya Tip III kalitede saf su üretimi

Genel laboratuvar kalitesinde su gerektiğinde, PURELAB Chorus 2 (RO/DI) ve PURELAB Chorus 3 (RO) ihtiyaçlarınıza uygun esnekliği sağlayan güvenilir çözümler sunar.

PURELAB® Chorus 2 (Temel RO/DI), direkt musluk suyundan Tip II kalitede saf su sağlar.

PURELAB® Chorus 3, istendiği anda saatte 120 litreye kadar değişen çeşitli debilerle Tip III (Birincil RO Kalitesi) kalitede su sağlar.

Su arıtma sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik PURELAB çözümü

Sorun

Uygulamanız çoğu kirleticı maddenin uzaklaştırılmasını gerektirir; fakat yüksek düzeyde arıtılmış veya ultra saf su gerekli değildir

En düşük maliyetle sahip olmak istiyorsunuz

PURELAB Çözümü

Kanıtlanmış RO teknolojisi, birinci kalite su ($1-50 \mu\text{S}/\text{cm}$) üretir.

Minimum düzeydeki arıtma sarf malzemeleri, uzun vadeli işletme maliyetlerinin düşük kalmasını sağlar

Yaygın Bilimsel Uygulamalar

Isıtmalı Su Distile Cihazı Değiştirme
Tampon Hazırlama
pH Çözeltisi Hazırlama
Yıkama / Durulama
Tüm Paslanmaz Çelik Otoklavlar
Genel Kimya
Spektrofotometri
Isıtma Banyoları
Hidroponi / Bitki Yetiştirme Dolapları
Buhar Jeneratörleri
Stabilite Odaları
Sterilizatör Besleme
Tip I ve II Su Sistemleri için Besleme



PURELAB® Chorus 3 – Geliştirilebilir ve Güvenilir

- Gelecekteki taleplerinizi karşılamak üzere daha yüksek debilere kolaylıkla yükseltilebilir
- İkili sistemler maksimum çalışma zamanını garanti eder



30 lt/saate kadar
(8 USG/saat)

60 lt/saate kadar
(16 USG/saat)

90 lt/saate kadar
(24 USG/saat)


120 lt/saate kadar
(32 USG/saat)

Depolama Tankları

Zamanla oluşan verim kaybını en aza indirerek optimum saflığın korunması

ELGA'nın benzersiz ürün yelpazesindeki 15, 30 ve 60 litrelik su tankları, depolanan arıtılmış suyun optimum saflığını korumak için tasarlanmıştır ve hava ile taşınan kirlenici maddelere karşı etkili koruma sağlar.

Depolama tankları, PURELAB® Chorus su arıtma sistemlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Benzersiz yer tasarrufu sağlayan tasarım, su arıtma sistemi için bir altlık oluşturarak, yekpare ve kompakt bir ünite elde edilmesini sağlar. Bu çözüm, ayrı bir tank ihtiyacını ortadan kaldırır ve tezgah üstü alandan önemli ölçüde yer kazandırır. Tercih edilirse, tank PURELAB Chorus'un üstüne yerleştirilebilir veya laboratuvarınızın yerleşim planına uyacak şekilde bağımsız bir tank olarak da tedarik edilebilir.

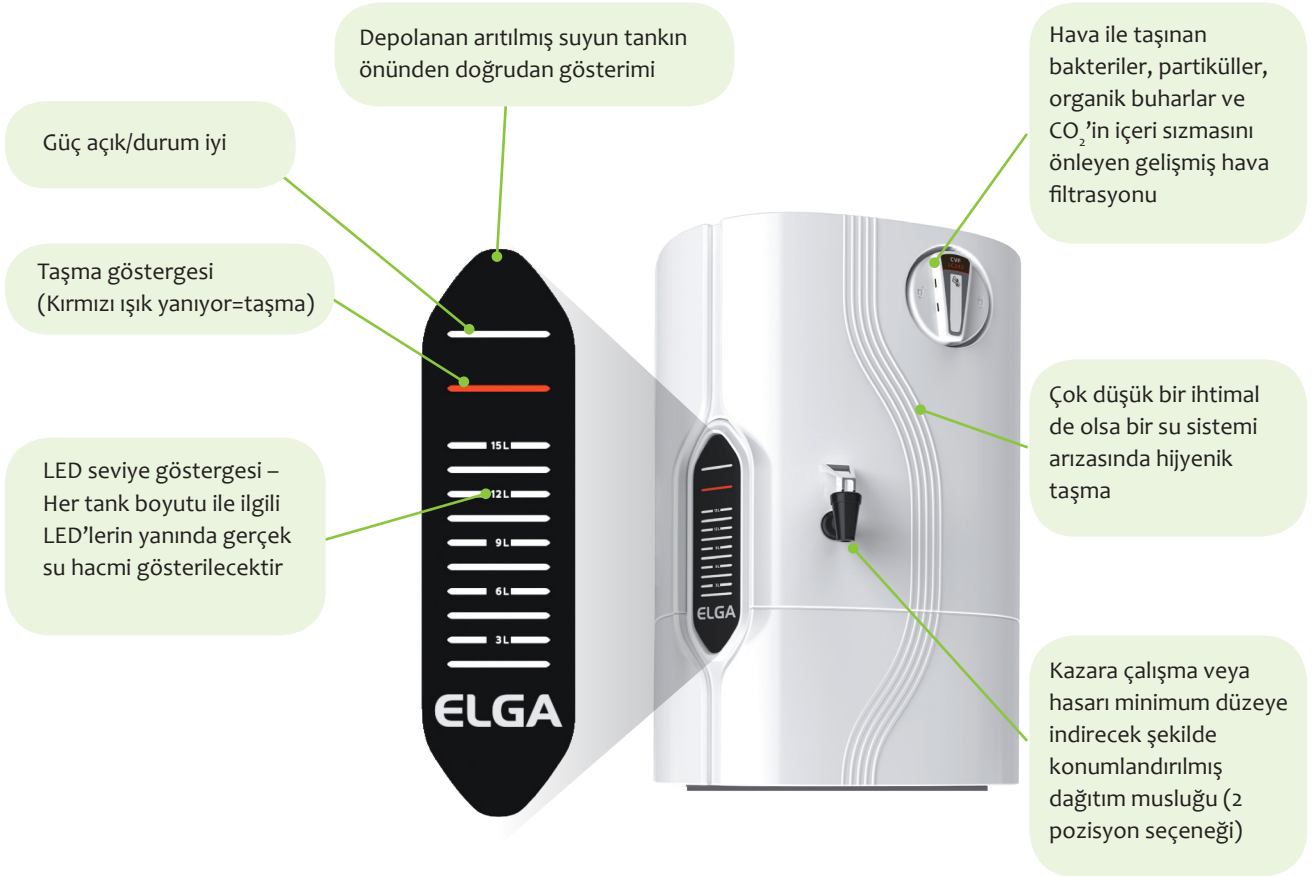

- Laboratuvar yerleşim planınıza uyacak çok sayıda konumlandırma/ montaj seçeneği
- Otomatik yeniden doldurma özelliğiyle birlikte tank su seviyelerinin izlenmesi, saflaştırılmış suyun her zaman hazır bulundurulmasını sağlar
- Bakterileri barındırabilecek statik alanlar bulunmamasını sağlamak üzere, optimize edilmiş / minimum yüzey alanı ve direk saf su akışı ile tasarlanmıştır
- Yosun oluşumu ve mikrobiyal çoğalmayı önlemeye yönelik düzgün iç yüzeyle birlikte atıl opak polietilen konstrüksiyon
- Tamamen kendinden drenajlı alt taban, daha bütün sanitizasyon ve daha hızlı durulama zamanı sağlar
- Ayrı bir tanka bağlantı için göz zevkini bozabilecek ve zarar görebilecek borular olmadan hızlı ve kolay kurulum



**PURELAB Chorus'un
üstüne yerleştirilen
depolama tankı**



**Depolama tankının
üstüne yerleştirilen
PURELAB Chorus**

Kalite Taahhüdü

PURELAB Chorus Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) tarafından onaylanmış olan ve BS EN ISO 9001:2008 standardını karşılayan ELGA LabWater Global Operations kuruluşunda üretildiklerini ve test edildiklerini doğrulayan bir Uygunluk Sertifikası ile birlikte tedarik edilir.

ELGA'nın imalat tesisi, LRQA tarafından onaylanmıştır ve çevre yönetim sistemi ISO 14001:2004'e uygundur.

PURELAB Chorus, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) Direktifi ve Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması (RoHS) Direktifinde öngörülen gerekliliklere uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvenlik Garantisi

PURELAB Chorus, güvenlik ve elektromanyetik uyumlulukla ilişkili CE direktiflerine uygundur ve akredite edilmiş bir dış şirket tarafından onaylanmış ve test edilmiştir. PURELAB Chorus, aynı zamanda IEC/ EN61010-1 ve UL61010-1'in gerekliliklerine de uygundur ve uygunluğu gösteren bir ETL etiketiyle işaretlenmiştir.





ANAMED & ANALİTİK GRUP
ANALİTİK ÇÖZÜMLERDE GÜVENCENİZ

Anamed & Analitik Grup, İstanbul merkez, Ankara ve İzmir olarak üç ofisten tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir.

İstanbul Ofis

Acarlar Ticaret Sitesi
F Blok, Kat 1, D: 5
Kavacık, Beykoz
İSTANBUL

T: (216) 331 17 06 (PBX)
F: (216) 331 17 37
E: sales@anamed.com.tr

Ankara Ofis

Büyük Esat Mah.
Uğur Mumcu Sok.
34/5 G.O.P Çankaya
ANKARA

T: (312) 418 18 29 (PBX)
F: (312) 417 70 32
E: sales.ankara@anamed.com.tr

İzmir Ofis

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad No:81
Bayraklı Tower Kat:9 D: 59-60
35030 Bornova
İZMİR

T: (232) 347 3500
F: (232) 347 3565
E: sales.izmir@anamed.com.tr

LabWater Uzmanları

ELGA, su hizmetleri konusunda dünya lideri durumundaki Veolia Water Solutions and Technologies'in ayrılmaz bir parçasıdır. Veolia Water Solutions and Technologies dünya çapında 10,500 kişiden oluşan bir ekibe sahip ve su döngüsünün her aşamasında müşterilere su çözümleri sağlayabilme becerisi ile bilinmektedir.

ELGA ekibi sadece su ve suyun arıtılmasına odaklanmış durumda. Şirket geçen 75 senelik süre boyunca geliştirilen eşsiz teknik ve bilimsel uygulama uzmanlığına katkı sağlamaktadır. Bizler, tek kullanım noktalarındaki su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi, montajı ve servis işlemlerine tabi tutulması ile birlikte mimarlarımız, danışmanlarımız ve müşterilerimizle istişare ederek büyük projeler konusunda ortaya çıkabilecek tüm zorlukların üstesinden gelmede deneyimliyiz.

Küresel Vatandaşlık Bağlılığı



Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

ELGA ürünleri üretim, kullanım ve kullanım ömrü sonu gibi her aşamada çevre üzerinde en az olumsuz etkiyi yaratacak biçimde tasarlanıyor. ELGA firması çevresel yönetim standartları konusunda ISO9001 ve ISO14001 sertifikalarına sahiptir.

Bizler tüm ürünlerimizin kullanım ömrü boyunca oluşacak karbon değerini hesaplayabiliyoruz ve bu bilgileri tüm müşteri ve ortaklarımızla paylaşıyoruz.

'Su arıtma endüstrisinde elimizde bulundurduğumuz liderlik unvanıyla çevresel açıdan sürdürülebilir teknolojiler ve ürün tasarımları kullanarak sürekli yenilikler yapma yükümlülüğüne sahibiz. Böylelikle tüm operasyonlarımızın minimum düzeyde iklimsel etkileri olmasını sağlayabiliyoruz.'

Nora Ikene Genel Müdür, ELGA LabWater



Solutions & Technologies
www.elgalabwater.com